

DIODE LASER LX16 PLUS

- THE WOODPECKER SMART DIODE LASER IS A **6 IN 1** MULTI-PURPOSE DENTAL LASER FOR:
 - **PERIO – IMPLANT – ENDO – SURGERY – LASER THERAPY – TMJ.**
- IT PROVIDES PRECISION CUTTING, DISINFECTION, PAIN RELIEF, AND FASTER HEALING WHILE IMPROVING PATIENT COMFORT AND CLINIC EFFICIENCY.



Before treatment




Under treatment



Four weeks later


- SURGERY

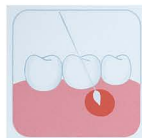

Abscess
(ព្យាបាលជុំអាម៉ូសែស ជុំខ្លះ)



FRENECTOMY
(កាត់ FRENUM / កាត់ខ្សែចងអញ្ចាញ)

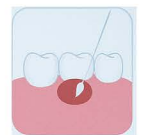

EPULIS
(វះយកជុំសាច់/ជុំសាច់រលាកលើអញ្ចាញ)




INCISIONS/EXCISIONS
(កាត់ ឬកាត់ចេញសាច់)




GINGIVAL TROUGHING
ប្រើជំនួសអំពោះការកាត់អញ្ចាញ ដោយជួយបង្កើតចង្កូរជុំវិញធ្មេញ (GROOVE IN THE GINGIVAL TISSUE) ហើយជួយខាត់ឈាម និងទឹករំងៃជុំវិញធ្មេញ



FIBROMA
(វះយកជុំសាច់ FIBROMA ក្នុងមាត់ ឬលើអញ្ចាញ)

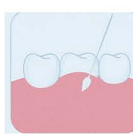

GINGIVECTOMY
(កាត់អញ្ចាញលើសចេញ)

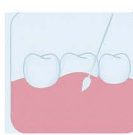

GINGIVOPLASTY
(កាត់ទម្រង់អញ្ចាញ)




HIDDEN TEETH
(ការវះបង្ហាញធ្មេញកប់ / ធ្មេញមិនទាន់ចេញ)

- PERIODONTICS (PERIO – ជំងឺអញ្ចាញ)




PERIO. GERM REDUCTION (កាត់បន្ថយមេរោគនៅអញ្ចាញ និងជុំវិញឫសធ្មេញ ដើម្បីព្យាបាលជំងឺអញ្ចាញ)

- IMPLANTOLOGY (IMPLANT)

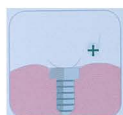

IMPLANT UNCOVERY (វះបើកអញ្ចាញដើម្បីបង្ហាញ IMPLANT ដែលបានដាក់)

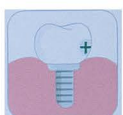

PERIIMPLANTITIS (ព្យាបាលការរលាកជុំវិញ IMPLANT (ដូចជាជំងឺអញ្ចាញជុំវិញ IMPLANT))

- ENDODONTICS (ENDO – បូសឆ្មេញ)



ENDO. GERM REDUCTION (សម្អាតមេរោគក្នុងបូសឆ្មេញ មុនពេលដ្ឋិតបូស។)



PULPOTOMY (ការកាត់សាច់បូសផ្នែកលើ និងទុកសាច់បូសនៅក្នុងឆ្មេញ)



GANGRENE (ព្យាបាលសាច់បូសដែលងាប់ ខូច ឬឆ្លង និងសម្អាតបូសឆ្មេញ។)

- SOFT LASER THERAPY (ឡាស៊ែរស្រាលសម្រាប់ព្យាបាល)



PAIN THERAPY
(កាត់បន្ថយការឈឺចាប់នៅឆ្មេញ ឬអញ្ចាញ ដោយជួយឲ្យសាច់បូស និងជាលិកាសះស្បើយលឿន។)



APHTHOUS ULCERS
(ព្យាបាលមាត់រលាក/មាត់ជាំ ឬប៉ះពាល់ដោយមេរោគ ឲ្យឈឺតិច និងជាលឿន។)



HAEMOSTASIS (ឃាត់ឈាមបានលឿនបន្ទាប់ពីព្យាបាល ឬកាត់តូច។)



WOUND HEALING (ជួយឲ្យបូសក្នុងមាត់ជាលឿន និងកាត់បន្ថយការរលាក។)



DENTIN HYPERSENSITIVITY (ព្យាបាលការស្រួចឆ្មេញពេលប៉ះត្រជាក់ ក្តៅ ផ្អែម ឬជ្ងា។)



DESENSITIZATION (កាត់បន្ថយភាពស្រួចស្រាវរបស់ឆ្មេញ ឲ្យមានអារម្មណ៍ធម្មតាវិញ។)



HERPES (ព្យាបាលមេរោគ HERPES នៅបម្រាមាត់ ឬក្នុងមាត់ ឲ្យឈឺតិច និងជាលឿន។)




BURNING MOUTH SYNDROME
(ព្យាបាលការ រលាកក្នុងមាត់ ដូចជាអណ្តាត អញ្ចាញ ឬបម្រាមាត់។)



TEETH WHITENING (ជួយឲ្យឆ្មេញស និងសស្អាតជាងមុន។)

- TMJ TREATMENT

FUNCTION TO USE	 PAIN THERAPY
TIP TO USE	 DT-30
POWER	4 W

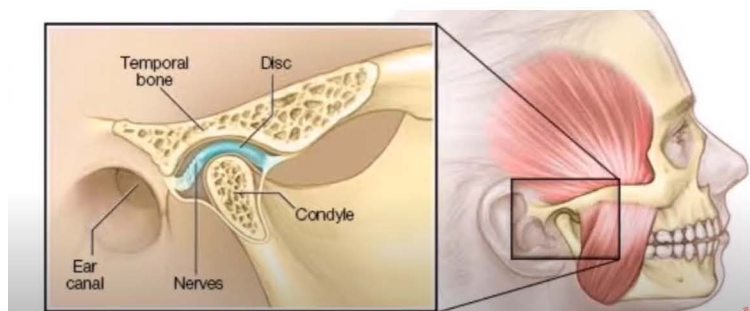


- ALL TIPS USAGE ON FUNCTIONS

HEAD TIPS	FUNCTIONS TO USE WITH TIP	BEST FOR
 DT-15	▪ Aphthous Ulcers: Effective for speeding up healing and reducing discomfort associated with canker sores. ▪ Herpes: Helps reduce inflammation and pain in herpes lesions in and around the mouth. ▪ Pain Therapy: Ideal for relieving pain, especially in areas like sensitive teeth, gums, or after dental procedures. ▪ Dentin Hypersensitivity: Effective for reducing sensitivity, especially from hot, cold, or sweet stimuli. ▪ Burning Mouth Syndrome: Relieves burning sensation in the mouth.	▪ Oral pain management, ulcers, herpes, burning mouth syndrome, and dentin hypersensitivity.
 DT-20	▪ Wound Healing: Encourages faster healing of oral wounds, ulcers, and small post-surgical areas. ▪ Pain Therapy: Can also be used to relieve pain associated with dental procedures, TMJ pain, or post-treatment discomfort.	▪ wound healing, and pain relief (especially in deeper tissue or larger areas).
 DT-30	▪ Haemostasis: This head is primarily used for controlling bleeding after minor dental procedures or injuries. ▪ Wound Healing: It can also help promote faster healing of oral wounds or post-surgical tissue repair. ▪ Pain Therapy: May be used for deeper tissue pain, particularly around the gums or jaw area.	▪ Stopping bleeding after procedures, wound healing, and deep tissue pain relief. Not used for teeth whitening.
 BT-8 TIP	▪ Teeth Whitening: One of the most effective tips for teeth whitening when paired with whitening gels. It helps speed up the whitening process by directing energy to the teeth's surface. ▪ Dentin Hypersensitivity: Can be used to treat teeth that are sensitive to hot, cold, or sugary foods by desensitizing the nerves. ▪ Pain Therapy: Also useful for mild pain relief, particularly in cases of tooth sensitivity or gum discomfort.	▪ Teeth whitening, dentin hypersensitivity, and mild pain relief.
 WHITENING-4 TIP	▪ Teeth Whitening: Designed specifically for whitening treatments. ▪ Desensitization: Helps reduce sensitivity during and after whitening treatments.	▪ Teeth whitening and desensitizing teeth during or after whitening procedures.

POWER USAGE DIFFERENT

- 1. PULSED MODE (E.G. 5 HZ, 65% DUTY):**
 - THE BEAM IS ON AND OFF REPEATEDLY.
 - EACH PULSE ENDS, THEN A SHORT REST PERIOD HAPPENS MEANING THE LASER DOESN'T STAY FIRING CONTINUOUSLY AT ONE SPOT.
 - THIS GIVES TISSUE A CHANCE TO COOL DOWN AND PREVENTS EXCESSIVE CARBONIZATION.
- 2. CW MODE (CONTINUOUS WAVE):**
 - THE BEAM STAYS ON CONTINUOUSLY FOR THE FULL SET TIME.
 - NO OFF BREAKS UNTIL THE TIMER RUNS OUT (OR YOU STOP IT).
 - SAFE ONLY AT VERY LOW POWER (MILLIWATTS), USED FOR THERAPY/BIOSTIMULATION.

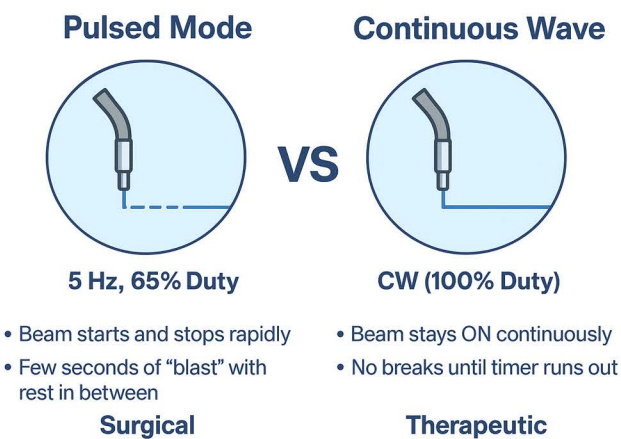

SPECIFICATION

WAVELENGTH	POWER (P _{MAX})	CLASS	MODE	MAIN USE
450 ± 20 NM (BLUE)	3 W	CLASS IV	CW / PULSED (1 HZ–20 KHZ)	DISINFECTION, BIOFILM REMOVAL, SUPERFICIAL COAGULATION
650 ± 20 NM (RED)	200 mW	CLASS II	CW	PHOTOBIMODULATION (HEALING, PAIN RELIEF, NERVE THERAPY)
976 ± 20 NM (INFRARED)	5 W	CLASS IV	CW / PULSED (1 HZ–20 KHZ)	SOFT TISSUE SURGERY (PULPOTOMY, FRENECTOMY, COAGULATION, STERILIZATION)
650 NM (AIMING BEAM)	< 5 mW	CLASS II	CW	VISUAL GUIDE ONLY
BATTERY	11.1 V, 2600 MAH ×2 (57.7 WH)			PORTABLE OPERATION