


PT-A AIR POLISHER & SCALER



សម្អាតធ្មេញដោយគ្មានការឈឺចាប់ ឬស្រោមធ្មេញ

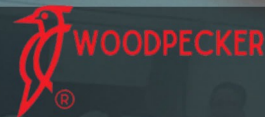

Before



Plaque



After



AIR POLISHER

មុខងារសំខាន់ៗនៃប្រព័ន្ធ AIR POLISHER

Supragingival [សម្អាតលើផ្ទៃធ្មេញ]

- ជម្រុះរាល់ស្នាមប្រឡាក់ដែលបង្កឡើងដោយអាហារ តេស្ត្រូ: និងបារី
- កំចាត់កំណកកំបោរ(Plaque) និងបាក់តេរី(Biofilm)
- សម្អាតបានជ្រៅទៅដល់តំបន់ដែលពិបាកលូកសម្អាត
- ជួយឲ្យផ្ទៃធ្មេញមានភាពរលោង និងសស្អាតចែងចាំង



Subgingival [សម្អាតក្រោមអញ្ចាញ]


- ជួយសម្រួលដល់ការសម្អាត និងថែទាំអ្នកជំងឺរលាកអញ្ចាញ
- មិនស្រោមឬសធ្មេញ និងមិនឈឺសាច់អញ្ចាញ
- ល្អបំផុតសម្រាប់សម្អាតជុំវិញធ្មេញ Implant
- មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់សម្រាប់ចង្កាក់ធ្មេញ (Safe for Periodontal pocket)



អេក្រង់បញ្ជា Touch Screen

AIR POLISHING MODE

បន្ថែមបន្ថយបរិមាណទឹក
WATER CONTROL DIAL

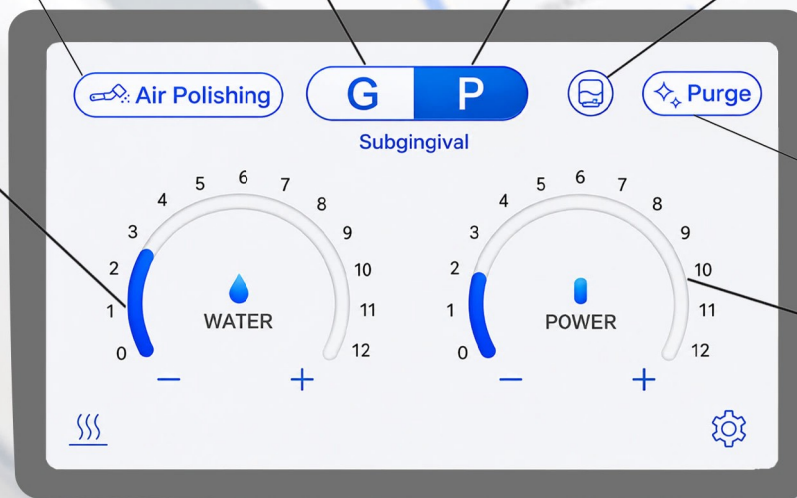


មុខងារជ្រើសរើសប្រភពទឹក
WATER SUPPLY SELECTION

មុខងារសម្អាតម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិ
AUTOMATIC PURGE FUNCTION

បន្ថែមបន្ថយកម្លាំងខ្យល់
POWER CONTROL DIAL

Anti-Clogging Technology

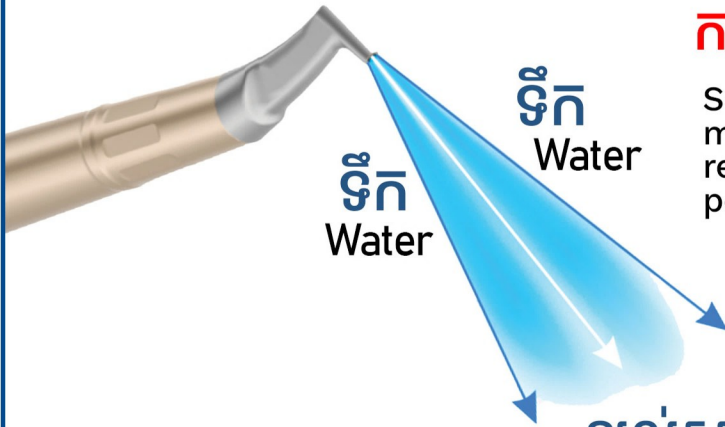

ការពារការកកស្ទះគន្លងទឹក និងខ្យល់


Separate powder and water paths prevent moisture from entering the powder chamber, reducing clogging and ensuring continuous performance.

ខ្យល់សម្អាត + ខ្សាច់

Compressed Air + Powder

Subgingival Air Polishing Handpiece & Nozzle

ក្បាលបាញ់ក្រោមអញ្ចាញធ្វើពីប៉ូលីមែរ (Polymers)

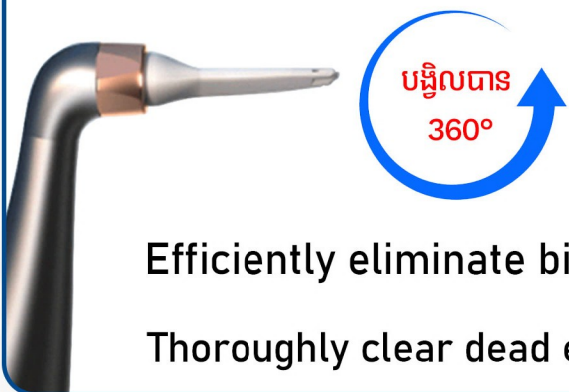


Efficiently eliminate biofilms


Thoroughly clear dead ends

Three-direction powder output

សម្អាតបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

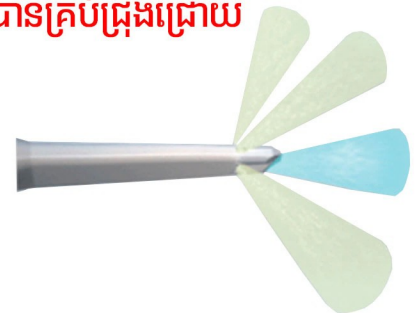


Recommended Angle

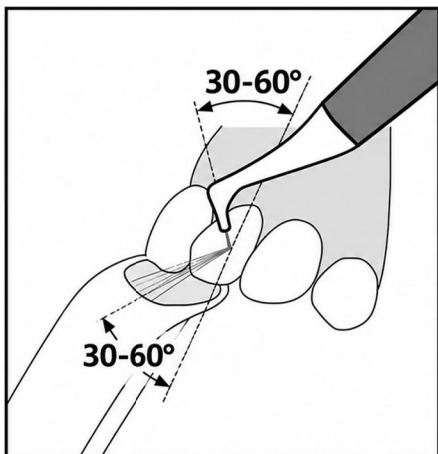

រក្សាមុំក្បាលបាញ់ចន្លោះពី 30°-60° ធៀបនឹងផ្ទៃធ្មេញ

Recommended Distance

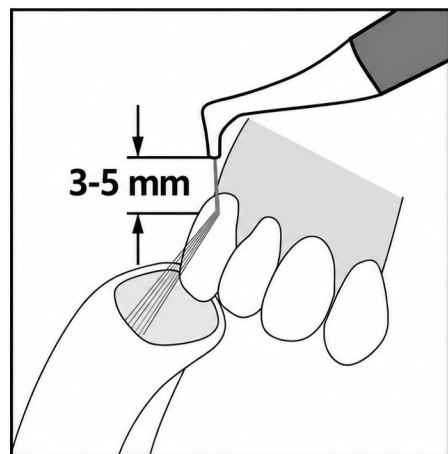

រក្សាចម្ងាយចុងក្បាលបាញ់ឲ្យឆ្ងាយពីផ្ទៃធ្មេញចន្លោះពី 3mm-5mm

SCALER

មុខងារសំខាន់ៗនៃប្រព័ន្ធ SCALER

Endo [សម្អាតឫសធ្មេញ]

- ជម្រកំបោរ និងកំណត់កាល់សូមក្នុងប្រហោងធ្មេញ
- លាងសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគក្នុងរន្ធឫសធ្មេញ
- ដកយក File ដែលបាក់ក្នុងរន្ធឫសធ្មេញចេញ

Supragingival [ផ្ទៃធ្មេញ]

- ថាមពលសម្អាតខ្លាំងកម្លាំងកំបោរបានយ៉ាងងាយស្រួល
- ធ្វើឱ្យសុខភាពអញ្ចាញធ្មេញល្អ
- មិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ខូចខាតធ្មេញទេ


Subgingival [ក្រោមអញ្ចាញ]

- ជួយសម្រួលដល់ការសម្អាត និងថែទាំអ្នកជំងឺរលាកអញ្ចាញ
- ល្អសម្រាប់សម្អាតជុំវិញធ្មេញ Implant
- អាចសម្អាតបានជ្រៅដល់ចង្កូរនៃឫសធ្មេញ (Root surface grooves)

អេក្រង់បញ្ជា Touch Screen

SCALING MODE

បន្ថែមបន្ទុកបរិមាណទឹក
WATER CONTROL DIAL

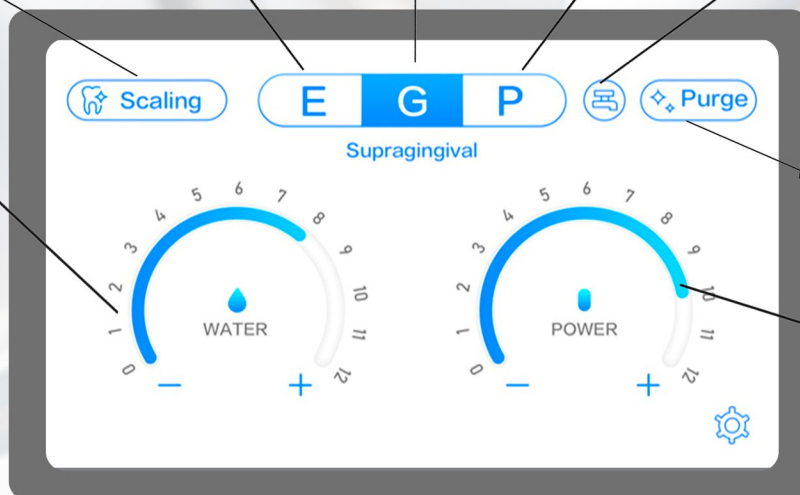

មុខងារជ្រើសរើសប្រភពទឹក
WATER SUPPLY SELECTION

មុខងារសម្អាតម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិ
AUTOMATIC PURGE FUNCTION

បន្ថែមបន្ទុកម្លាំងខ្យល់
POWER CONTROL DIAL

Elliptical vibration

រំញ័ររាង Ellipse

The elliptical vibration trajectory can achieve 0° angle operation between the tip and the tooth surface, enabling the polishing effect. Disperse the impact force between the tip and the teeth to achieve comfortable scaling. Achieve 360° scaling



ENDOTIC TIP



- With its high-efficiency ultrasonic conductivity and special design, this tip can effectively remove difficult-to-remove restorations using ultrasonic technique.



- Diamond-coated ball tip, safe and efficient for removing foreign objects from the pulp chamber and locating calcified root canal orifice.



- For removal of calcified debris, bad fillings and overhangs in the pulp chamber. Can also enlarge the canal wall where a broken file is located for easy retrieval.



- For removal of post, broken file, filling debris, etc. in the upper 1/3 of the canal.



- Extremely fine and flexible tip with good ultrasonic conductivity, used to remove foreign objects from the upper 1/3 of the canal (bendable).



- Extremely fine and flexible tip with good ultrasonic conductivity, used to remove foreign objects from the apical 1/3 of the canal (bendable).

ប្រភេទម្សៅ



- Super Pro 65mm Erythritol sup powder
- SUPER 14mm Erythritol sub powder
 - Used for the removal of biofilm, pigment and soft dirt on the adult supragingival. It provides more comfortable treatment coupled with efficient scaling.



- GENTLE 65mm Glycine sup powder
- GENTLE MINI 25mm Glycine sub powder
 - Gentle and non-invasive to the soft tissue in the periodontal pocket, and to the gingival, upper jaw as well as dental tissue surface, can be used for maintenance of pediatric teeth, orthodontics, restorations, periodontal and implants.



- FAST 65mm Sodium bicarbonate sup powder
 - Used for rapid removal of stubborn pigments, soft dirt and biofilm on adult gingival

TIP និង FUNCTION របស់ SCALER

TIPS	Tip Names	Use case
	- P50L - P50R - P59	- ការប្រើប្រាស់ទូទៅសម្រាប់ការកោសកំបោរធ្មេញ - មានកម្រិតភាពរឹងទាបជាង Enamel មានភាពយឺតជាង និងផ្តល់ភាពងាយស្រួលស្រណុកចិត្តជាងដល់អ្នកជំងឺ
	- G1 - G4 - G5 - G6	- សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាល Root bifurcation area
	- P54R - P54L	- សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាល Root bifurcation area - អាចលូកចូលទៅបានជ្រៅក្នុងចង្កូរនៃផ្ទៃឫសធ្មេញ Pear-shaped grooves និងផ្នែកខាងលើនៃជួរជម្រាលប្រឡាយឫសធ្មេញ
	- P94 - P95 - P96L - P97R	- ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសម្អាត Implants - ផលិតឡើងពី PEEK Material ដែលអាចដាក់ក្នុង Autoclave បាន
	- G20	- 120μm diamond coated - ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការកោសយក dentin ចេញ and និងសម្រាប់រៀបចំ “subgingival shoulder”
	- G21	- 50μm diamond coated - ប្រើប្រាស់សម្រាប់ Finishing និង polishing ទៅលើជើងទម្រលើអញ្ចាញធ្មេញ និងក្រោមអញ្ចាញធ្មេញ
	- G33	- 90μm diamond coated - ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការរៀប Dental veneers